



**AKADEMISKA  
BARNSJUKHUSET**

# Skötselrutiner Trilogy EVO

Föräldra- och assistensinformation, egenvård



## Har du frågor, kontakta:

Kontakta oss via e-tjänster på [www.1177.se](http://www.1177.se)

Barnsjukvård i hemmet, sjuksköterska 018- 611 24 96

Text



Vänd sida för  
att läsa mer!



# Rengöringsrutiner

Dessa anvisningar är till för att förhindra bakterietillväxt och därmed undvika infektioner i samband med ventilatorbehandling i hemmet. För mer information, se Instruktionsbok.

Flergångsmaterial rengörs in- och utvändigt en gång per vecka samt vid behov med varmt vatten och oparfymerat diskmedel. Skölj mycket noga. Allt material ska vara torrt innan det får användas!

Vid kontinuerlig användning av Trilogy EVO har patienten två uppsättningar av flergångsmaterial att varva mellan vid rengöring.

1. *Trilogy EVO*. Dra alltid ur nätverkskabeln vid rengöring. Dammtorkas utvändigt vid behov med fuktig trasa.
2. *Filter för att skydda ventilatorn*. Engångsmaterial. Byts en gång per vecka.
3. *Ventilatorslang*. Flergångsmaterial.
4. *Swivel*. Där expirationsluften flödar ut som läckage (ska därför ej övertäckas). Flergångsmaterial.
5. *Connector (grön)*. Flergångsmaterial.
6. *Fukt-värmeväxlare*. Engångsmaterial. Byts en gång per dygn, oftare vid behov.
7. *Koppling med veckad slang*. Sätts på trakealkanylen. Engångsmaterial. Byts en gång per vecka.
8. *Foam inlet filter*. På baksidan av ventilatorn finns ett luftintag med ett inloppsfilter. Filtret är flergångsmaterial.. Filtret måste vara absolut torrt innan det sätts tillbaka i apparaten. Luftintaget får ej täckas för. Byts var sjätte månad.
9. *Partikelfilter*. Sitter innanför filterlocket och skyddar apparaten från smuts och damm. Byt partikelfiltret varje månad. Vid larm Blocked inlet filter, ska foam inlet filter tvättas och partikelfiltret bytas.

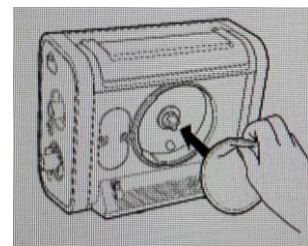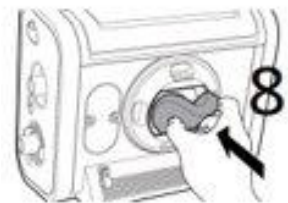

### **Vid användning av mask:**

1. *Mask med inbyggd utandningsventil och tillhörande slang.*  
Finns i flera storlekar. Flergångsmaterial. Rengörs två gånger per vecka samt vid behov med varmt vatten och oparfumerat diskmedel. Skölj flera gånger och torka ur noggrant.
2. *Maskhållare (2a) och huvudband i textil (2b).* Maskhållare tvättas i varmt vatten och disk- eller tvättmedel en gång per vecka samt vid behov. Sköljs noggrant. Huvudband i textil tvättas i maskin, 40 grader fintvätt, om den läggs i en tvättpåse med kardborrebanden knäppta.



## **Koppling av syrgas**

Syrgas kan vid behov kopplas till ventilatorn via lättviktsflaska, Hemlox syrgastank eller Oxygenkoncentrator. Syrgas enligt läkarordination. Syrgasslangen byts vid behov. Kopplas via en syrgasnippel på ventilatorns baksida.



## **Aircon Gen 2, aktiv befuktning**

- Används ofta nattetid då befuktaren går på el. Dagtid används torra slangar (se bild föregående sida).
  - Befuktaren ska sitta under ventilatorn och under hjärtlöjd.
  - Kammare och slangar byts var 30:e dag.
1. Koppla ihop de gröna slangarna och grå temperatursensorn till ventilatorn och befuktaren. Matcha ihop färgen på änden av sensorn med uttaget på befuktaren enligt bild 1 & 2.
  2. Koppla ihop vattenpåse med droppaggregat och fäst vid befuktaren (gör detta innan befuktningen sätts på). Systemet reglerar lagom vattennivå. Byt vattenpåse när den tar slut. Se bild 3.
  3. Ventilatorslang sätts på koppling till trakeostomi eller mask.  
När aktiv befuktning används behövs inte fukt-värmeväxlare (nr 6 föregående sida).



Bild 1  
1. Temperatursenor



Bild 2  
2. Kammare



Bild 3  
3. Gröna  
befuktningsslangar  
4. Steril vatten till  
befuktare

## Service

Årlig service och funktionsunderhåll (FU) av Trilogy EVO. Barnsjukvård i hemmet kontaktar patienten när det är dags för FU. Vid övriga problem med hemventilator Trilogy EVO kontakta Barnsjukvård i hemmet.

## Flygresa

Intyg kan behövas för att ta med Trilogy EVO på resa. Då apparaten är känslig för stötar ska den packas i handbagaget.

## Förbrukningsmaterial

Barnsjukvård i hemmet serverar med förbrukningsartiklar gällande andningshjälpmedel. Förbrukningsartiklar är beställningsvara - meddela i god tid när det behövs beställas nytt

## Inför sjukhusbesök

Om ditt barn förväntas bli inlagd på sjukhus ska slangen bytas till en engångsslang. Den byts 1 gång i veckan och kastas efter användning. Den tillhandahålls av Barnsjukvård i hemmet.

Den ska bytas inför sjukhusvistelsen och byts tillbaka till en flergångsslang inför hemgång. Apparaten ska även sprutas av med ytdesinfektion innan och efter sjukhusvistelse.

Ska ditt barn på besök på sjukhuset t.ex. mottagningsbesök eller röntgenundersökning går det bra att använda en ren flergångsslang.

Använder barnet aktiv befuktning (Aircon Gen 2) ska slangarna bytas inför och efter sjukhusvistelse.



### **1177 Vårdguiden**

Du hittar information och tjänster för din hälsa och vård på webbplatsen 1177.se. För sjukvårdsrådgivning ring 1177, öppet dygnet runt.



### **Kontakt Akademiska**

Akademiska sjukhuset nås via:  
[patientkontakt@akademiska.se](mailto:patientkontakt@akademiska.se)  
Patientkontakt 018-611 30 33,  
Växel: 018-611 00 00  
[www.akademiska.se](http://www.akademiska.se)