



AKADEMISKA
BARNSJUKHUSET

Skötselrutiner Trilogy 100

Föräldra- och assistensinformation, egenvård



Har du frågor, kontakta:

Kontakta oss via e-tjänster på www.1177.se

Barnsjukvård i hemmet, sjuksköterska

018- 611 24 96

Vänd sida för
Att läsa mer!




Rengöringsrutiner

Dessa anvisningar är till för att förhindra bakterietillväxt och därmed undvika infektioner i samband med ventilatorbehandling i hemmet. För mer information, se Instruktionsbok.

Flergångsmaterial rengörs in- och utvändigt en gång per vecka samt vid behov med varmt vatten och oparfymerat diskmedel. Skölj mycket noga. Allt material ska vara torrt innan det får användas!

Vid kontinuerlig användning av Trilogy 100 har patienten två uppsättningar av flergångsmaterial att varva mellan vid rengöring.

1. *Trilogy 100*. Dra alltid ur nätverkskabeln vid rengöring. Dammtorkas utvändigt vid behov med fuktig trasa.
2. *Filter för att skydda ventilatorn*. Engångsmaterial. Byts en gång per vecka.
3. *Ventilatorslang*. Flergångsmaterial.
4. *Swivel*. Där expirationsluften flödar ut som läckage (ska därför ej övertäckas). Flergångsmaterial.
5. *Connector (grön)*. Flergångsmaterial.
6. *Fukt-värmeväxlare*. Engångsmaterial. Byts en gång per dygn, oftare vid behov.
7. *Koppling med veckad slang*. Sätts på trakealkanylen. Engångsmaterial. Byts en gång per vecka.

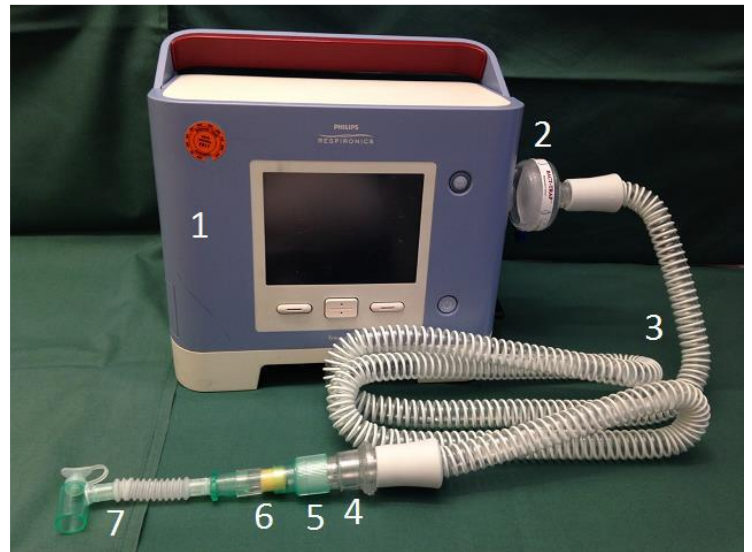

Användning av mask

1. *Mask med inbyggd utandningsventil och tillhörande slang*. Finns i flera storlekar. Flergångsmaterial. Rengörs två gånger per vecka samt vid behov med varmt vatten och oparfymerat diskmedel. Skölj flera gånger och torka ur noggrant.
2. *Maskhållare i textil*. Tvättas i varmt vatten och disk- eller tvättmedel en gång per vecka samt vid behov. Sköljs noggrant. Kan även tvättas i maskin, 40 grader fintvätt, om den läggs i en tvättpåse med kardborrebanden knäppta.



På baksidan av ventilatorn finns ett luftintag med ett skumgummifilter. Filtret är flergångsmaterial. Filtret måste vara absolut torrt innan det sätts tillbaka i apparaten. Luftintaget får ej täckas för.



Koppling av syrgas

Syrgas kan vid behov kopplas till ventilatorn via syrgasaggregatet på baksidan av maskinen. lättviktsflaska, Hemlox syrgastank eller Oxygenkoncentrator. Syrgas enligt läkarordination. Syrgasslangen byts vid behov.

Om syrgas kopplas till slangkretsen så behöver backventil kopplas in närmast apparaten för att minimera risken att syrgas vandrar bakåt i apparaten.



Aircon Gen 2, aktiv befuktning

- Används ofta nattetid då befuktaren går på el. Dagtid används torra slangar (se bild föregående sida).
 - Befuktaren ska sitta under ventilatorn och under hjärthöjd.
 - Kammare och slangar byts var 30:e dag.
1. Koppla ihop de gröna slangarna och grå temperatursensorn till ventilatorn och befuktaren. Matcha ihop färgen på änden av sensorn med uttaget på befuktaren enligt bild 1 & 2.
 2. Koppla ihop vattenpåse med droppaggregat och fäst vid befuktaren (gör detta innan befuktningen sätts på). Systemet reglerar lagom vattennivå. Byt vattenpåse när den tar slut. Se bild 3.
 3. Ventilatorslang sätts på koppling till trakeostomi eller mask.
När aktiv befuktning används behövs inte fukt-värmeväxlare (nr 6 föregående sida).

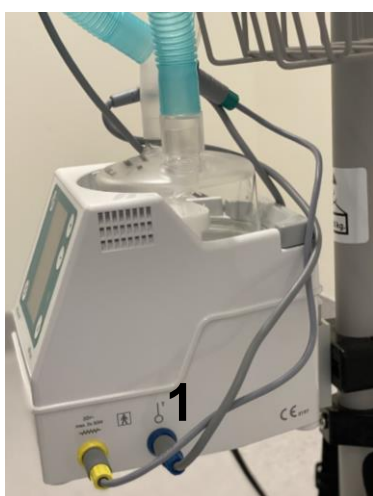


Bild 1
1. Temperatursenor



Bild 2
2. Kammare



Bild 3
3. Gröna befuktningsslangar
4. Steril vatten till befuktare

Service

Årlig service och funktionsunderhåll (FU) av Trilogy 100. Barnsjukvård i hemmet kontaktar patienten när det är dags för FU. Vid övriga problem med hemventilator Trilogy 100 kontakta Barnsjukvård i hemmet.

Flygresor

Intyg kan behövas för att ta med Trilogy 100 på resa. Då apparaten är känslig för stötar ska den packas i handbagaget.

Förbrukningsmaterial

Barnsjukvård i hemmet serverar med förbrukningsartiklar gällande andningshjälpmedel. Förbrukningsartiklar är beställningsvara - meddela i god tid när det behövs beställas nytt.

Inför sjukhusbesök

Om ditt barn förväntas bli inlagd på sjukhus ska slangen bytas till en engångsslang. Den byts 1 gång i veckan och kastas efter användning. Den tillhandahålls av Barnsjukvård i hemmet.

Den ska bytas inför sjukhusvistelsen och byts tillbaka till en flergångsslang inför hemgång. Apparaten ska även spritas av med ytdesinfektion innan och efter sjukhusvistelse.

Ska ditt barn på besök på sjukhuset t.ex. mottagningsbesök eller röntgenundersökning går det bra att använda en ren flergångsslang.

Använder barnet aktiv befuktning (Aircon Gen 2) ska slangarna bytas inför och efter sjukhusvistelse.

För dig som är barn eller ungdom

Du som är barn eller ungdom har på samma sätt som vuxna rätt att få information som är lätt att förstå. På www.akademiska.se/ung kan du till exempel läsa om hur det går till vid våra vanligaste undersökningar.



1177

Du hittar information och tjänster för din hälsa och vård på webbplatsen 1177.se. För sjukvårdsrådgivning ring 1177, öppet dygnet runt.



Kontakt Akademiska

Akademiska sjukhuset nås via:
Patientkontakt 018-611 30 33,
patientkontakt@akademiska.se
Växel 018-611 00 00
www.akademiska.se