



AKADEMISKA
BARNSJUKHUSET

MyAIRVO 2

Föräldra- och assistentinformation, egenvård



Har du frågor, kontakta:

Kontakta oss via e-tjänster på www.1177.se

Barnsjukvård i hemmet, sjuksköterska

018-611 24 96



Vänd sida för
att läsa mer!


Skötselrutiner

Dessa anvisningar är till för att förhindra bakterietillväxt och därmed undvika infektioner vid högflödesbehandling i hemmet. För ytterligare information se Instruktionsbok.

MyAIRVO 2 dammtorkas utvändigt vid behov med fuktig trasa.

1. Näsgrimman är engångsmaterial. Byts efter behov, cirka en gång i veckan. Vid användning endast nattetid eller kortare stunder kan en näsgrimma användas i upp till en månad.
2. Till vissa näsgrimmor behövs Wiggelpads med kardborre - byts vid behov.
3. Flergångskammare. Det finns två kammare att alternera mellan. Fyll på med kranvatten till nivåsträcket. Kranvattnet ska kokas och svalna innan användning. Om ni har egen brunn kan sterilt vatten användas beroende på vattenkvalitet. Kontrollera att det alltid finns vatten i kammaren, MyAIRVO 2 säger inte till när vattnet är slut. Kammaren handdiskas, se daglig rengöring/veckorengöring.
4. Andningsslangen är engångsmaterial. Byts efter två månaders användning.

På baksidan av MyAIRVO 2 finns ett luftfilter som är engångsmaterial. MyAIRVO 2 meddelar när filter behöver bytas (cirka tre månaders mellanrum).

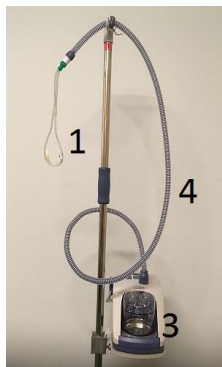

Daglig rengöring

- Häng andningsslangen högt, tryck på on/off-knapp en gång för att starta torkningsprogrammet (stängs av automatiskt efter 99 minuter). Skölj grimman i vanligt vatten. Man kan torka grimman genom att sätta tillbaka den på slangen igen när ca 10 minuter återstår av torkprogrammet. **OBS! Barnet får ej vara kopplad till apparaten vid torkningen!** Om avstängning behöver ske innan torkningsprogram är klart: tryck på on/off-knappen två gånger.
- Efter 99 min, när torkningen är klar, ta av flergångskammaren och skölj den i vanligt vatten och fyll på nytt, alternativt sätt i en ny kammare med nytt vatten om det finns två kammare.

Veckorengöring

När torkningsläget är klart: stäng av apparat med on/off knapp i 5 sekunder.

- Koppla bort apparaten från väggen, dra ur elkontakten.
- Töm slangen på kondens genom att hålla den högt. Ta sen loss den från apparaten.
- Ta bort kammaren: Flergångs-häll ut vattnet, öppna botten och tvätta bas och överdel på kammaren med mildt diskmedel och skölj sedan. Lägg kammaren i ättika i 10 min, 1 del 12% ättika och 2 delar ljummet vatten. Skölj sen kammaren. Detta för att ta bort ev kalkbeläggning.
- Rengör anslutningsporten, den hålighet på apparaten där slangen sitter, och resten av apparaten med vatten och mildt diskmedel, fuktig trasa, ej våt. Torka torrt.
- Sätt sen tillbaka slang och kammare med nytt vatten.
- Sätt åter elkontakten i väggen.

Slangen torkas vid den dagliga rengöringen och behöver inte rengöras ytterligare.

Vid användning av barngrimmor: kontrollera att Juniorläge är aktiverat (symbol med fjäril och fågel på displayen) och att kammartemperatur är inställd på 34 °C.

MyAIRVO 2 kan fås med tillhörande ställning om så önskas. Vid förflyttning ska MyAIRVO 2 förvaras i sin transportväska.

Service

Vid problem med högflödesutrustningen kontakta Barnsjukvård i hemmet.

Flygresa

Intyg kan behövas för att ta med MyAIRVO 2 på resa. Då apparaten är känslig för stötar ska den packas i handbagaget.

Förbrukningsmaterial

Barnsjukvård i hemmet serverar med förbrukningsartiklar gällande andningshjälpmedel. Förbrukningsartiklar är beställningsvara - meddela i god tid när det behövs beställas nytt.

Inför sjukhusvistelse

Om ditt barn förväntas bli inläggande på sjukhus ska andningsslangen och gramma bytas inför sjukhusvistelsen och bytas igen inför hemgång.

Apparaten ska även spritas av med ytdesinfektion innan och efter sjukhusvistelse

Ska ditt barn på besök på sjukhuset t.ex. mottagningsbesök eller röntgenundersökning går det bra att använda samma andningsslang och gramma.

För dig som är barn eller ungdom

Du som är barn eller ungdom har på samma sätt som vuxna rätt att få information som är lätt att förstå. På www.akademiska.se/ung kan du till exempel läsa om hur det går till vid våra vanligaste undersökningar.



1177

Du hittar information och tjänster för din hälsa och vård på webbplatsen 1177.se. För sjukvårdsrådgivning ring 1177, öppet dygnet runt.



Kontakt Akademiska

Akademiska sjukhuset nås via:
Patientkontakt 018-611 30 33,
patientkontakt@akademiska.se
Växel 018-611 00 00
www.akademiska.se