



AKADEMISKA  
BARNSJUKHUSET

# BiPAP A40 - Skötselrutiner

Föräldra- och assistentinformation, egenvård



## Har du frågor, kontakta:

Kontakta oss via e-tjänster på [www.1177.se](http://www.1177.se)

Sjuksköterska, Barnsjukvård i hemmet

018-611 24 96


Vänd sida för  
att läsa mer



## Rengöringsrutiner

Dessa anvisningar är till för att förhindra bakterietillväxt och därmed undvika infektioner i samband med BiPAP/CPAP-behandling i hemmet.

För ytterligare information se Instruktionsbok.

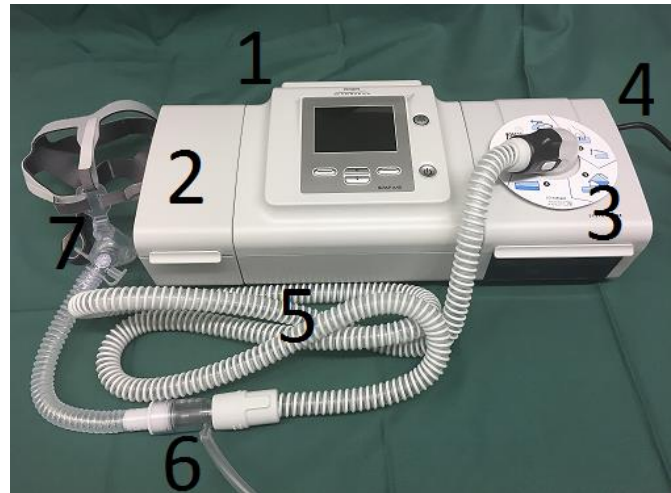

1. *BiPAP A40*. Dra alltid ur elkontakten vid rengöring. Dammtorkas med fuktig trasa utvändigt vid behov. Se till att apparaten är helt torr innan elkontakten återinsätts.
2. *Löstagbart batteri*. Kapacitet ca 5h. Laddas automatiskt närhelst det är anslutet A40 och apparaten drivs med växelström.
3. *Befuktare*. Vattenbehållaren rengörs dagligen i varmt vatten och oparfymerat diskmedel. Fyll på med kranvatten till nivåsträcket. Kranvattnet ska kokas och svalna innan användning. Om patienten har egen brunn kan sterilt vatten användas beroende på vattenkvalitet. Kontrollera att det alltid finns vatten i kammaren, BiPAP A40 säger inte till när vattnet är slut. Befuktaren avkalkas vid behov med 1 del ättika och 10 delar vatten. Låt ättiksvattnet stå max 10 minuter i behållaren. Diska och skölj därefter mycket noga. Befuktare kan endast användas när apparaten är ansluten till el.
4. *Elsladd*
5. *Ventilatorslang*. Flergångsmaterial. Rengörs in- och utvändigt en gång per vecka samt vid behov med varmt vatten och oparfymerat diskmedel. Skölj mycket noga. Viktigt att slangen är helt torr innan den kopplas på maskinen.
6. *Koppling för tillförsel av syrgas*. Kopplas till lättviktstub, Hemlox syrgastank eller Oxygenkoncentrator. Syrgasslang byts vid behov. Vid administration av syrgas ska en backventil användas, denna kopplas närmast apparaten.



7. *Koppling Mask – finns i flera storlekar. Flergångsmaterial. Rengörs två gånger per vecka samt vid behov med varmt vatten och oparfymerat diskmedel. Skölj flera gånger och torka ur noggrant.*

*Maskhållare i textil. Tvättas i varmt vatten och disk- eller tvättmedel en gång per vecka samt vid behov. Sköljs noggrant. Kan även tvättas i maskin, 40 grader fintvätt i tvättpåse med kardborrebanden knäppta.*

På baksidan av BiPAP A40 finns ett luftintag med ett skumgummifilter. Filtret är flergångsmaterial. Det rengörs en gång per vecka samt vid behov i varmt vatten och oparfymerat diskmedel. Filtret måste vara absolut torrt innan det sätts tillbaka i apparaten. Luftintaget får ej täckas för. Skumgummifiltret ska bytas var 6:e månad.



För att vara mer mobil kan befuktare och elsladd kopplas bort. Torr ventilatorslang kopplas till uttaget. Samma rengöringsrutin på bägge ventilatorslangarna.



## Flygresa

Intyg kan behövas för att ta med BiPAP A40 på resa, kontakta Barnsjukvård i hemmet. Då apparaten är känslig för stötar ska den packas i handbagaget i medföljande väska.

## Förbrukningsmaterial

Barnsjukvård i hemmet serverar med förbrukningsartiklar gällande andningshjälpmedel. Förbrukningsartiklar är beställningsvara - meddela i god tid när det behövs beställas nytt!

## Service

Service av BiPAP A40 sker vid behov. Vid problem med BiPAP A40 kontakta Barnsjukvård i hemmet.

## För dig som är barn eller ungdom

## För dig som är barn eller ungdom

Du som är barn eller ungdom har på samma sätt som vuxna rätt att få information som är lätt att förstå. På [www.akademiska.se/ung](http://www.akademiska.se/ung) kan du till exempel läsa om hur det går till vid våra vanligaste undersökningar.



### 1177

Du hittar information och tjänster för din hälsa och vård på webbplatsen 1177.se. För sjukvårdsrådgivning ring 1177, öppet dygnet runt.



### Kontakt Akademiska

Akademiska sjukhuset nås via:  
Patientkontakt 018-611 30 33,  
[patientkontakt@akademiska.se](mailto:patientkontakt@akademiska.se)  
Växel 018-611 00 00  
[www.akademiska.se](http://www.akademiska.se)