



**AKADEMISKA  
BARNSJUKHUSET**

# MyAIRVO 2 - skötselrutiner med koppling till trakeostomi

Föräldra- och assistentinformation, egenvård



## Har du frågor, kontakta:

Kontakta oss via e-tjänster på [www.1177.se](http://www.1177.se)

Sjuksköterska barnsjukvård i hemmet

018-611 24 96




Vänd sida för  
Att läsa mer

# Skötselrutiner

Dessa anvisningar är till för att förhindra bakterietillväxt och därmed undvika infektioner vid högflödesbehandling i hemmet. För ytterligare information se Instruktionsbok.

MyAIRVO 2 dammtorkas utvändigt vid behov med fuktig trasa.

1. Koppling till trakeostomi är engångsmaterial. Byts efter en månad.
2. Andningsslangen är engångsmaterial. Byts efter två månaders användning.
3. Flergångskammare. Patienten har två kammare att alternera mellan. Fyll på med kranvatten till nivåsträcket. Kranvattnet ska kokas och svalna innan användning. Om patienten har egen brunn kan sterilt vatten användas beroende på vattenkvalitet. Kontrollera att det alltid finns vatten i kammaren -MyAIRVO säger inte till när vattnet är slut. Kammaren handdiskas, Se Daglig rengöring/Veckorengöring.
4. På baksidan av MyAIRVO finns ett luftfilter som är engångsmaterial. MyAIRVO2 meddelar när filter behöver bytas (cirka tre månaders mellanrum).

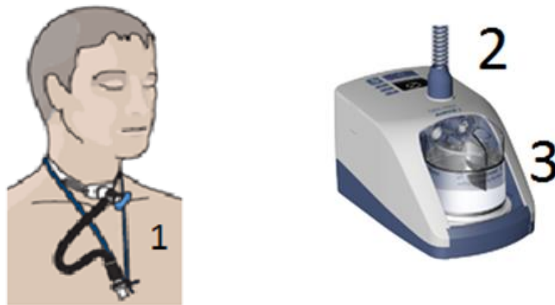

## Daglig rengöring

- Häng andningsslangen högt, tryck på on/off-knapp en gång för att starta torkningsprogrammet (stängs av automatiskt efter 99 minuter). Skölj trakanslutningen i vanligt vatten. Man kan torka trakanslutningen genom att sätta tillbaka den på slangen igen när cirka 10 minuter återstår av torkprogrammet.  
**OBS, barnet får ej vara kopplad till apparaten vid torkningen!**  
Om avstängning behöver ske innan torkningsprogram är klart: tryck på on/off-knappen två gånger.
- Efter 99 min, när torkningen är klar, ta av flergångskammaren och skölj den i vanligt vatten och fyll på nytt, alt sätt i en ny kammare med nytt vatten om det finns två kammare.

## Veckorengöring

När torkningsläget är klart: stäng av apparat med on/off knapp i 5 sekunder.

- Koppla bort apparaten från väggen, dra ur elkontakten.
- Töm slangen på kondens genom att hålla den högt. Ta sen loss den från apparaten.
- Ta bort kammaren: Flergångs-häll ut vattnet, öppna botten och tvätta bas och överdel på kammaren med mildt diskmedel och skölj sedan. Lägg kammaren i ättika i 10 min, 1 del 12% ättika och 2 delar ljummet vatten. Skölj sen kammaren. Detta för att ta bort ev kalkbeläggning.
- Rengör anslutningsporten, den hålighet på apparaten där slangen sitter, och resten av apparaten med vatten och mildt diskmedel, fuktig trasa, ej våt. Torka torrt.
- Sätt sen tillbaka slang och kammare med nytt vatten.
- Sätt åter elkontakten i väggen.

Slangen torkas vid den dagliga rengöringen och behöver inte rengöras ytterligare.

Vid användning av koppling till trakeostomi ska vuxenläge vara aktiverat (kontrollera att **ingen** symbol med fjäril och fågel finns på displayen) och att kammartemperatur är inställd på 37 °C.

MyAIRVO kan fås med tillhörande ställning om så önskas. Vid förflyttning ska MyAIRVO 2 förvaras i sin transportväska.

## Service

Vid problem med MyAIRVO 2 kontakta Barnsjukvård i hemmet.

## Flygres

Intyg kan behövas för att ta med MyAIRVO 2 på resa. Då apparaten är känslig för stötar ska den packas i handbagaget.

## Förbrukningsmaterial

Barnsjukvård i hemmet serverar med förbrukningsartiklar gällande andningshjälpmedel. Förbrukningsartiklar är beställningsvara - meddela i god tid när det behövs beställas nytt!

## Inför sjukhusvistelse

Om ditt barn förväntas bli inläggande på sjukhus ska andningsslangen och trakeostomi-koppling bytas inför sjukhusvistelsen och bytas igen inför hemgång.

Apparaten ska även spritas av med ytdesinfektion innan och efter sjukhusvistelse

Ska ditt barn på besök på sjukhuset t.ex. mottagningsbesök eller röntgenundersökning går det bra att använda samma andningsslang och trakeostomi-koppling.

## För dig som är barn eller ungdom

Du som är barn eller ungdom har på samma sätt som vuxna rätt att få information som är lätt att förstå. På [www.akademiska.se/ung](http://www.akademiska.se/ung) kan du till exempel läsa om hur det går till vid våra vanligaste undersökningar.



### 1177

Du hittar information och tjänster för din hälsa och vård på webbplatsen [1177.se](http://1177.se). För sjukvårdsrådgivning ring 1177, öppet dygnet runt.



### Kontakt Akademiska

Akademiska sjukhuset nås via:  
Patientkontakt 018-611 30 33,  
[patientkontakt@akademiska.se](mailto:patientkontakt@akademiska.se)  
Växel 018-611 00 00  
[www.akademiska.se](http://www.akademiska.se)